

Pleasure
SV

Pleasure
SV

個々に適したカスタマイズを行うために、カスタマイズ パラメータを含める必要があります。
カスタマイズパラメータのないオーダーでは、レンズはデフォルト値で最適化されます。
Pleasure SVの詳細については、営業部にお問い合わせください。



Nippon Lens Industrial Co., Ltd 2-3-25 Shimomatsu-cho, Kishiwada city, Osaka, 596-0823 Japan
TEL: +81(0)72-423-2421 / FAX: +81(0)72-438-0187
nippon-lens.co.jp


Digital Ray-Path®はIOTにより商標登録されています

シングルビジョンレンズ
(単焦点レンズ)

自分のスタイルや世界を再発見しよう。

より広い距離での制限のない視界

デジタルデバイスは私たちの生活を変えました。近くを見る時間が増え、よりワイドにそしてクリアに、様々なディスプレイを見る必要があります。

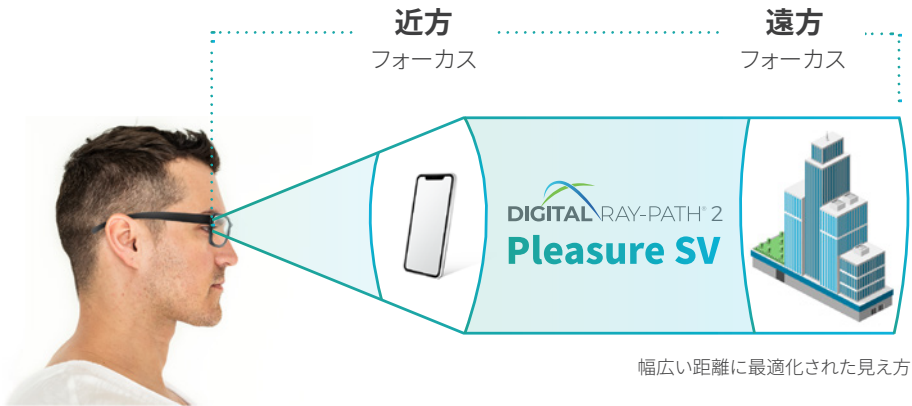

遠方視力のみを目的に最適化された従来のシングルビジョンレンズとは異なり、Pleasure SVは幅広い距離に最適化されています。

Pleasure
SV

Pleasure SVレンズは、今の新しいライフスタイルのために設計されており、装用者に大きな快適さと優れたビジュアルクオリティを提供します。




幅広い空間で最適化

Pleasure SVレンズにはDigital Ray-Path®2テクノロジーが採用されています。

斜め方向の収差を数学的に補正することに加えて、Digital Ray-Path®2は装用者の明視範囲で色々な物を見るために素早く・自然にピントを合わせます。

装用者は、優れたビジュアルクオリティ、より大きな快適さを実感していただけます。

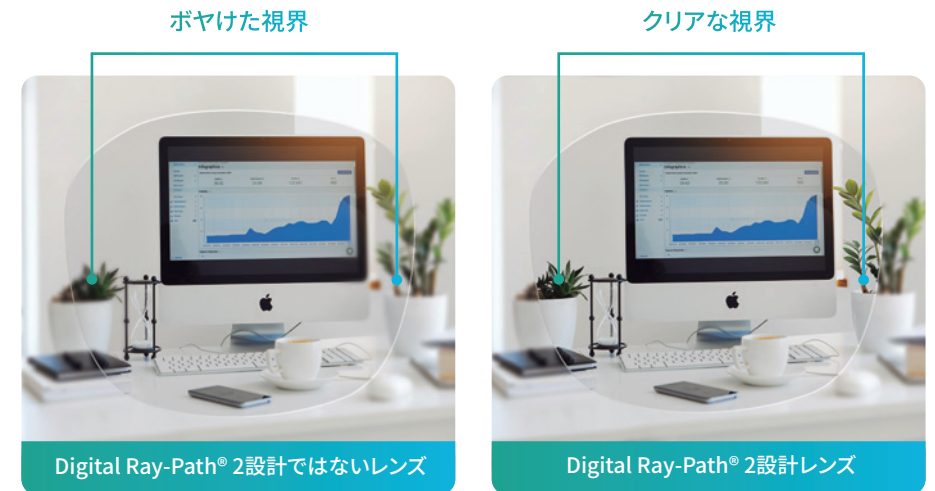

DIGITAL RAY-PATH® 2

Digital Ray-Path®2は、優れたビジュアルクオリティでより大きな快適さ、より正確なピント合わせを提供します。

優れたビジュアルクオリティ

Digital Ray-Path®2テクノロジーは、斜め方向の収差を数学的に補正することに加えて、着用者の明視範囲で色々な物を見るために素早く・自然にピントを合わせます。

斜めの収差(歪曲収差)は、着用者ごとの個別な調整により減少させることが可能です。


これらの調整は、着用者の視覚的な快適性に影響を与えない範囲で行われます。

これを実施することで、着用者に最適なビジュアルクオリティを提供します。

ぼやけの領域


最適補正領域* 50%

カスタマイズされていない既成シングルビジョンレンズ

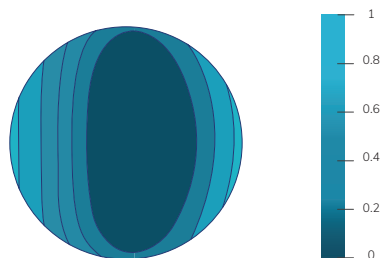


最適補正領域* 75%

パーソナライズされたフリーフォームデジタルシングルビジョンレンズ

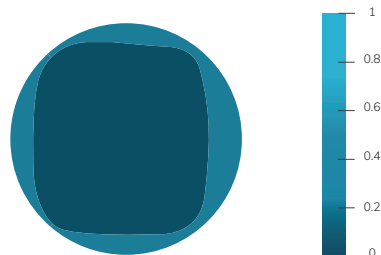

最適補正領域* 100%

Digital Ray-Path®2でカスタマイズされたPleasure SVレンズ

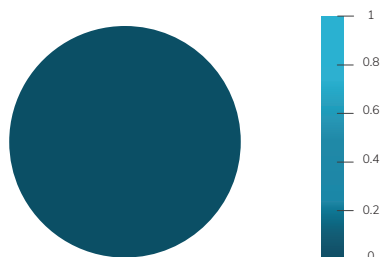

※最適補正領域の定義は、斜めの収差(歪曲収差)に伴うボケの差異が0.25D以下。

例: S+3.00C-1.50AX180°.
傾斜角=8° そり角=5°

常にパーソナライズ

Pleasure SVレンズは3,149の個々の視線方向を考慮したパーソナライズド設計です。着用者のユニークな多くの要素は設計自体の作成に利用されます。これらの要素は、アイポイントと瞳孔間距離だけでなく、着用者の処方度数、フレームのサイズ・形状、レンズのベースカーブ、および着用状態を含みます。

レンズ全体にシャープでクリアな視界をもたらすため 3,149の視線方向を考慮



Pleasure SVレンズにより満足した装用者

*臨床研究では、Pleasure SVレンズが全体的な満足度、ビジュアルクオリティーや周辺視界を向上させることが示されています。



テスト装用者の満足度**

装用者の
96%



Pleasure SVのレンズに
非常に満足

装用者の
96%



遠方・中間・近方のすべて
において優れたビジュアル
クオリティを実感

装用者の
95%



日常生活の中で快適に
使用できる

装用者の
94%



Pleasure SVレンズに素
早く適応できる

**Pleasure SVレンズは、幅広い距離での使用に優れた
ビジュアルクオリティを提供します。**

*スコアは1から5で、5が一番優れたスコアです。94%の着用者は、4または5のスコアをつけ、「デジタルデバイスに適している」と見え方を評価しました。

**2020年・IOTの臨床試験による (n=18)

特長とメリット



幅広い距離に合わせてパーソナライズされたシングルビジョンレンズ。



様々な作業距離とフォーカスしたい範囲に最適なパーソナライゼーション



従来の度数・フレーム計上を考慮したレンズよりも薄い。



日本レンズ
NIPPON LENS since 1935



装用者の目の調節力を配慮して、視界の歪曲収差を最小化



視線をどの方向に向けても、優れたビジュアルクオリティを提供。



シャープかつ柔軟で快適なピント。

Pleasure
SV

「このレンズで優れたピントの
鋭さやビジュアルクオリティ
を感じます。」

臨床実験の参加者、
女性、28歳

Pleasure SVレンズは、屋内と屋外の両方の距離において
優れたビジュアルクオリティを提供します

*広告のモデルは臨床研究の実在患者ではありません。

理想的なフィット感

デジタル眼精疲労や近方視困難を感じない
単焦点レンズの装用者にお勧め

Pleasure SVレンズの注文方法

個々に適したカスタマイズを行うためにカスタマイズパラメータを含める
必要があります。

カスタマイズパラメータのないオーダーでは、レンズはデフォルト値に
なります。



Pleasure SVの注文方法の詳細については、営業部にお問い合わせください。